

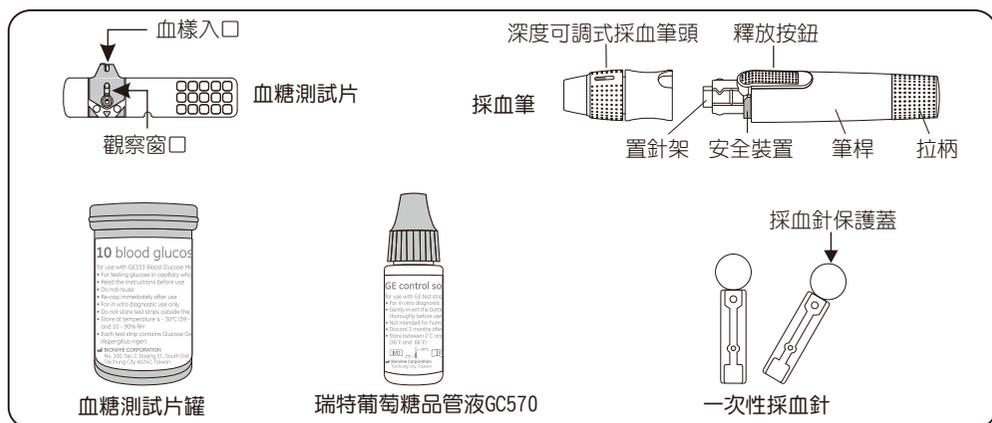


GE 血糖監測系統-簡易使用說明(GE333) (自我測試及專業使用皆可)

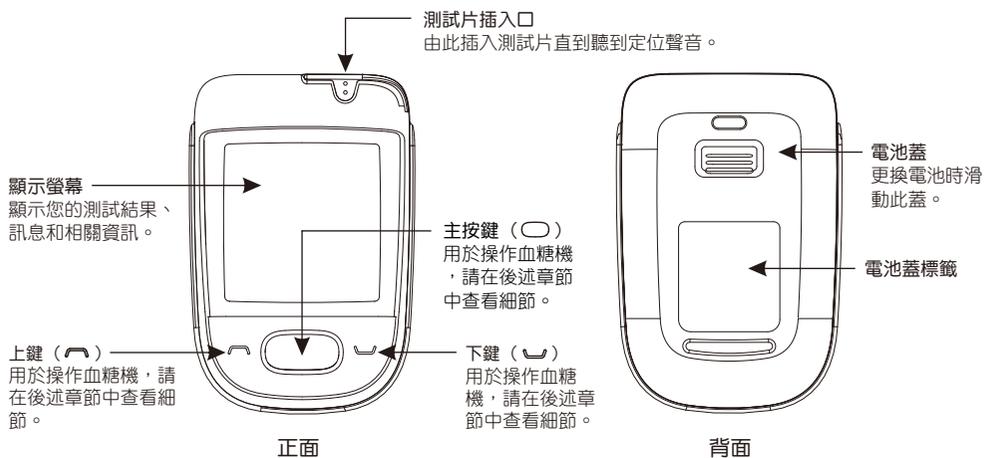

1> 安裝電池

- 1) 將血糖機翻轉。往上按壓，並拉起電池蓋即可將電池蓋卸下。
- 2) 安裝電池，確保電池以正確的方向放置。
- 3) 將電池蓋放回原來位置並按壓，直到電池蓋滴答一聲咬合到位。

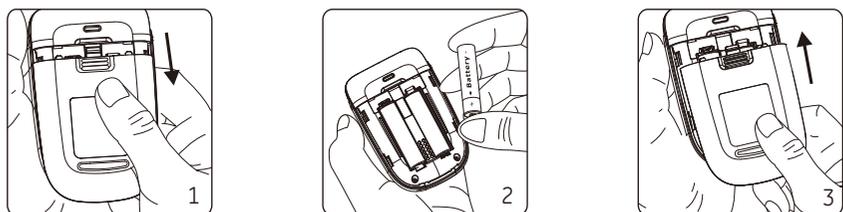


2> 設置您的血糖機

- 1) 按下主按鍵啟動血糖機。
- 2) 按住主按鍵「○」七秒直到進入設定模式。在進入設定模式前你將會看到電源關閉的動作，此時請繼續按住按鈕，直到進入設定模式，螢幕上之年份格式會閃爍。
- 3) 按上鍵或下鍵更改年份。
- 4) 按主按鍵「○」確認該年份並切換到月份設定。




- 5) 重複步驟3及4更改日期、時間格式、小時、分鐘及音量設定。按主按鍵「○」確認後即完成設定。

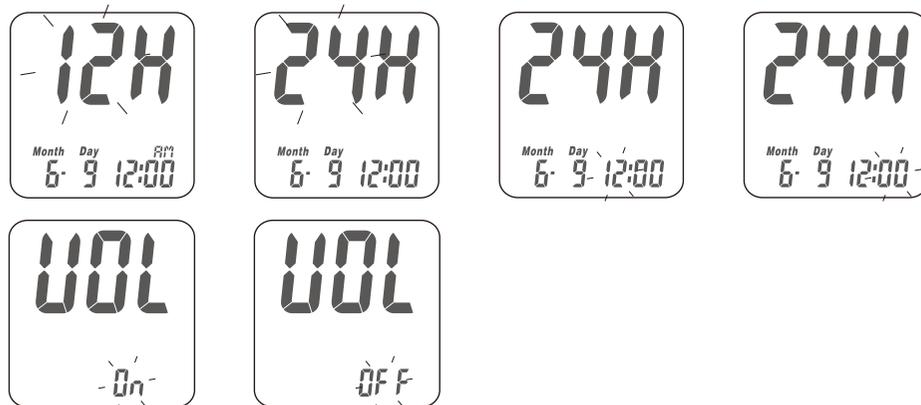


3> 準備採血筆

- 1) 拉開採血筆頭。
- 2) 一手握住採血筆頭，另一手握住筆桿。稍微向下施力，筆頭與筆桿分離後，再向兩側拉出。
- 3) 將採血針放入採血筆的置針架內。

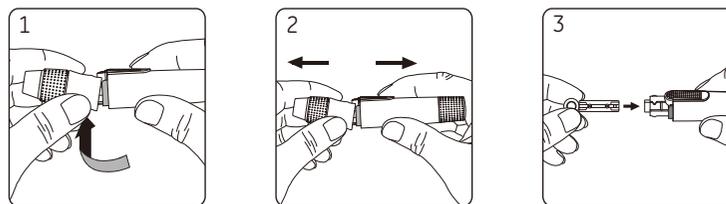


- 4) 旋轉取下採血針保護蓋，並保留保護蓋。
- 5) 壓回關上採血筆筆頭。
- 6) 旋轉筆頭選擇深度並確認選定深度對準視窗，以便取適合的血量。深度設定是以個人皮膚狀況為基準：“□”為柔軟或較薄皮膚用；“□□”為一般皮膚用；“□□□”為較厚皮膚用。
- 7) 一手握住採血筆，另一手將採血筆拉柄後拉到底，採血筆將會扣起釋放按鈕。放開拉柄，此時拉柄會自動回到原本接近釋放按鈕的位置。

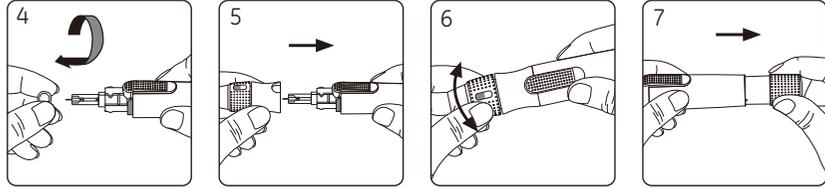


4 進行測量


- 1) 請先清洗並且完全擦乾您的雙手。從測試片罐內取出新的測試片，並立即蓋上測試片罐的蓋子。
- 2) 如圖示，將測試片有綠色蓋片那一面，面向使用者且指示符號向下，插入測試座入口，並將測試片推進測試座底部直到卡住停止。此時血糖機會自動開機，並同時聽到一聲「嗶」。
- 3) 伴隨著「嗶」的一聲，出現了一個血滴符號「☼」。現在您可以在2分鐘之內提供血樣。將採血筆對準並貼緊指尖以備採血，然後按下釋放按鈕進行採血（建議最佳刺針位置為中指或無名指）。

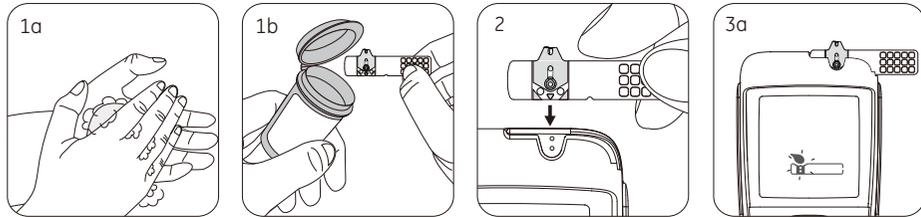

- 4) 用手擠壓您的指尖以便採一滴血樣，我們建議的血樣量為0.75 ~ 3.0 μL 。超過3.0 μL 的血樣量過大。低於0.75 μL 的血樣量可能會導致檢測結果不準確和出現Er4血樣量不足的警示訊息。在這種情況下，請用新的測試片重新檢測。

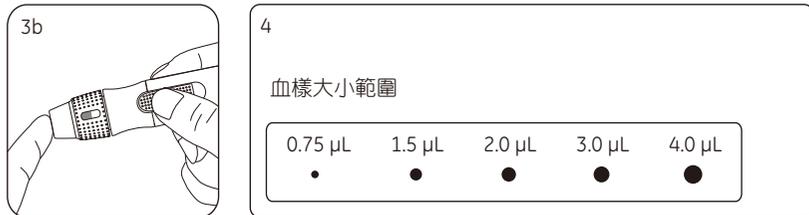


- 5) 將您的手指血樣接觸並停留測試片血樣入口，直到聽到嗶一聲及看到觀察窗口完全充滿血液為止。如果觀察窗口沒有完全被血液充滿或沒有啟動測試。請即刻丟棄此測試片，並用新測試片重複上述步驟。
- 6) 在螢幕上您將看到倒數計時模式。5秒鐘後將顯示檢測結果。如需更詳細的說明，請參考GE333血糖機使用手冊。

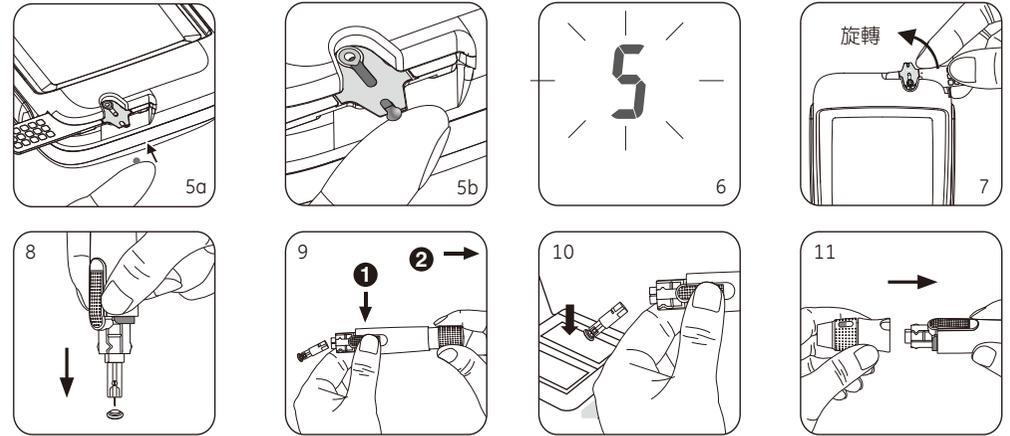

- 7) 以旋轉方式取下試片並依照法規或行政規定適當地處理或丟棄。
- 8) 拉開採血筆頭，不要碰觸採血針，握住採血筆直接將採血針朝採血針保護蓋按下。
- 9) 先按住釋放按鈕，另一手將採血筆拉柄往後拉到底，可將已蓋上保護蓋的採血針安全退出。
- 10) 將已使用過的採血針丟棄於不會刺傷他人的容器內。
- 11) 檢測完畢後，重新蓋回採血筆筆頭。

不同部位-手掌或手臂採血

1. 選擇透明筆蓋，遵照上述步驟1至2進行操作。
2. 按摩手掌或手臂上的刺針區域若干秒鐘。
3. 立即將帶有透明筆蓋的採血筆緊靠手掌或手臂。
4. 然後按下釋放按鈕。
5. 繼續緊靠手掌或手臂按住採血筆，並在幾秒鐘之內慢慢增加壓力直到血樣量足夠。
6. 遵照上述步驟9至11進行操作，棄置已使用過的一次性採血針。

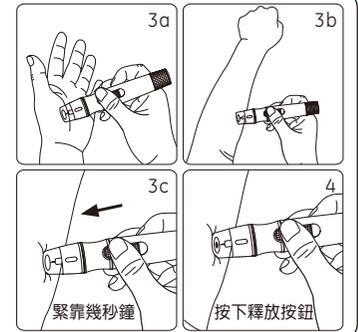

注意事項：
- GE採血筆僅供個人使用。

詳細的血糖機操作步驟及測量結果說明請參閱使用手冊。

發行日期：2021-05



GE is a trademark of General Electric Company and is used under license by Bionime Corporation, No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist., Taichung City 40242, Taiwan

製造廠/藥商名稱：華廣生技股份有限公司大慶廠
製造廠/藥商地址：台中市南區大慶街二段100號
免付費客服專線：+886 800-241-688
Email: info@bionime.com
http://www.bionime.com
Made in Taiwan

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigilance@ul.com

CE
0197

101-3GM236-090
TW/(HK)